

自由診療 + 処方薬の代謝時の安全確認などに

導入事例



- ・ AGA 治療
- ・ 美容皮膚科など処方薬の腎肝機能の確認
- ・ オンライン診療で血液検査が必要な患者に使用
- ・ 生活習慣病予備軍をスクリーニングし治療につなげる
- ・ 男性ホルモン補充療法をする前に前立腺がんを除外
- ・ 栄養指導を取り入れたオーソモレキュラー療法の展開

01 増患

郵送検査なので、来院できない**全国の患者さん**が対象になります。

02 治療の継続

遠隔処方に伴う腎・肝機能の数値を管理できるので、数値の悪化を防ぎながら**継続しての治療**が可能。

転勤や在宅勤務による**治療の中断も防止**します。

03 検査結果はダウンロードシステムから取得

検体が検査センターに到着後、4～5営業日程で**検査結果データ (CSV・Excel)** をデータでご確認いただけます。

04 ご利用者様による自己採血のサポートが充実

自己採血に関する**専用コールセンター**が対応可能。

医師や看護師の手を煩わせることなく、検体を**検査センターに発注**する手間もかかりません。

検査器具の名称と用途

吸引器

血液を吸い取ります

ランセット

指先にキズをつけます
(1つは予備)

シリンダー

血液を分離します

密閉キャップ

分離血液を密閉します

トレイ

ボトル (溶液入り)

検査溶液と血液を混ぜ、
血液の分離をします
(アルミ袋に入っています)

バンソウコウ 消毒布

- デメカル血液検査セットは、日本で初めて厚生労働省から組合せ医療機器として認められた血液検査セットです。
- 主に自治体や企業健保の健診未受診者対策、生命保険の高額契約加入審査時に本製品が採用されています。
- 取扱説明書に従って自己採血。不安な方のために「デメカルサポートセンター」とフリーダイヤルで繋がります。
- 「デメカルキット」は、同梱器具すべてを返送していただき、使用後の器具は医療ゴミとして処理します。

DEMECAL の特徴

検査に必要な血液量は
0.065ml (65 μ L)
です。このわずかな
血液量で病院の検査
と遜色のない血液検査
結果が得られます。




- 採取した血液をその場で**血球と血漿に分離**します。
- 分離することにより、**常温・常圧**で7日間ほど精度が保たれます。
- キットの操作ミスなどで検査を失敗してしまっても、新しい検査キットが**無償で再送付**されます。



内容物 (汎用品)

検査キット・返送用封筒・取扱説明書・検査申し込み用紙 (※検査項目によって質問票やメジャーが入ります)

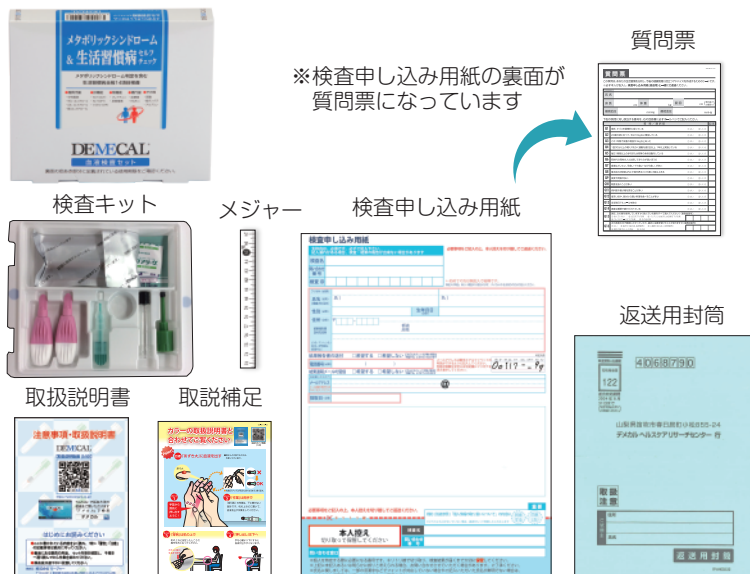

* 血液量不足や操作不完全など、何等かの理由で検査結果が出せなかった場合には、再検査用の新しい検査キットが無償で支給されます